



INFUSIONSTHERAPIE

## Intrafix<sup>®</sup> SafeSet

Die Extraportion Sicherheit in der Infusionstherapie

# BEGEGNEN SIE TÄGLICHEN HERAUSFORDERUNGEN MIT HOHER SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

Scharfer Einstechdorn mit  
hervorragender Haltekraft,  
ISO-konform

Klares Schlauchmaterial  
mit der Weichmacher-  
Alternative DEHT

Die Rollenklemme –  
ergonomisch und  
noch präziser



Air  
Stop

Prime  
Stop

## Intrafix® SafeSet – DAS INFUSIONSBESTECK MIT AIRSTOP UND PRIMESTOP

Dank der innovativen AirStop-Membran im Boden der Tropfkammer läuft das Besteck nicht mehr leer. Sie können umstecken oder das System austauschen, wenn es der Arbeitsablauf erlaubt. Ihre Patienten sind vor Luftinfusionen geschützt.

Die PrimeStop-Membran am Patientenkonnektor verhindert das Auslaufen von Lösung: Das System befüllt und entlüftet sich automatisch.

Sie haben die Hände frei und das Vorbereiten mehrerer Infusionen auf einmal ist möglich. Eine vergleichende Studie<sup>1</sup> zwischen Intrafix® SafeSet und konventionellen Infusionsbestecken hat gezeigt, dass Intrafix® SafeSet sowohl Zeit als auch Kosten bei der Vorbereitung von Infusionen spart.

LITERATUR: 1. Frei A. Wirtschaftlichkeitsanalyse – Peripherenöse Schwerkräftinfusionen – Intrafix® SafeSet mit Vorteilen gegenüber herkömmlichen Infusionssystemen. Die Schwester Der Pfleger 2004; 43, 5/04, 60-64.



### ERGONOMISCHE ROLLENKLEMME UND UNBEDENKLICHES SCHLAUCHMATERIAL

Die hochpräzise Rollenklemme ermöglicht durch ihr ergonomisches Design eine komfortable Einstellung der Tropfenrate.

Das DEHP-freie Schlauchmaterial ist in einer IV-Studie toxikologisch geprüft und als unbedenklich eingestuft worden. Für mehr Sicherheit bei der intravenösen Applikation.



### STARKER LUFTABSCHIEDENDER FILTER

Die Filtermembran im Tropfkammerboden wirkt wie eine Barriere. Sie schützt auch nach dem Leerlaufen des Behälters durch einen konstanten Flüssigkeitsspiegel vor dem Eindringen von Luft und groben Partikeln in die Infusionsleitung.



### PRIMESTOP-SCHUTZKAPPE

Die Schutzkappe mit der hydrophoben Membran macht Schluss mit austretender Lösung und schützt damit vor Kontamination.

Sie ermöglicht das automatische Befüllen der Leitung und spart bei gleichzeitiger Vorbereitung mehrerer Infusionen wertvolle Arbeitszeit. Durch die PrimeStop-Membran ist Intrafix® SafeSet bis zur Konnektion an den Venenzugang ein geschlossenes System.

---

### IHRE VORTEILE

- Schutz vor dem Eindringen von Luft in die Infusionsleitung\* und Reduzierung der Infektionsgefahr
- Zeit- und Kostenersparnis durch problemloses Umstecken bei kompatiblen Lösungen
- Spürbare Erleichterung des Arbeitsablaufs durch Vermeidung von Flüssigkeitsaustritt beim Entlüften
- Hochpräzise Rollenklemme und DEHP-freies Schlauchmaterial

---

\* Bitte allgemeine Sicherheitsvorkehrungen beachten. Bei Massenfertigungsprodukten können Funktionsabweichungen gemäßzeitigem Stand der Technik nicht vollständig ausgeschlossen werden.



Schutzkappe entfernen und den Dorn senkrecht ohne Drehen einstechen. Flüssigkeitsspiegel durch kräftiges Drücken auf das Tropfkammerunterteil einstellen. Bei Schwerkraftinfusion bis zum grünen Ring befüllen. Die Belüftungs-klappe wird bei starren Infusionslösungsbehältern jetzt geöffnet.




Öffnen der Rollenklammer – die Verbindungsleitung füllt sich mit der Lösung. Dazu kann die Leitung in die dafür vorgesehene Haltevorrichtung am Rollenklammergehäuse geschoben werden.

Die Entlüftung der Leitung erfolgt automatisch durch den PrimeStop in der Schutzkappe.



Die Schutzkappe verbleibt bis zur vollständigen Entlüftung auf dem Patientenkonnetktor. Zum Entfernen wird die Schutzkappe mit dem integrierten PrimeStop seitlich weggedrückt. Den Lock-Anschluss des Infusionsgerätes mit dem patientenseitigen Zugang verbinden.

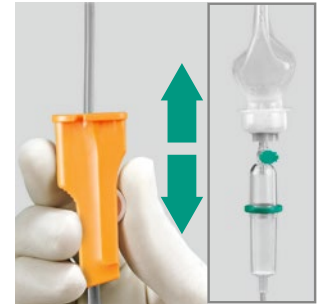

Öffnen der Rollenklammer und Einstellen der gewünschten Tropfenrate.

Bei Leerlaufen des Lösungsbehälters verhindert der AirStop – die Membran im Tropfkammerboden –, dass Luft in die Verbindungsleitung gelangen kann.

Intrafix® SafeSet	Schlauchlänge	Art.-Nr.	PZN
Standard	180 cm	4063000	01900697
mit Rückschlagventil	180 cm	4063001	03688853
Neutrapur, PVC-frei	180 cm	4063002	03688913
Standard	230 cm	4063003	05548932
mit Y-Zuspritzventil Caresite*	210 cm	4063004C	–
mit Y-Zuspritzventil Safeflow**	210 cm	4063004	05143477
mit Dreiwegehahn Discofix® C	220 cm	4063006	06934821
mit Dreiwegehahn Discofix® C und Rückschlagventil	180 cm + 15 cm	4188136	09694174
UV-Protect, mit orange-transparentem Schlauch	180 cm	4063131	10788957

Verkaufseinheit: 100 Stück

\*verfügbar ausschließlich im Klinikmarkt

\*\*verfügbar ausschließlich im ambulanten Markt

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de  
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen