

referenced are trademarks of their respective owners.
 Software © 2020, Axxin, used under license. All trademarks
 of either the Abbott group of companies or their respective owners.
 © 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks
 durchgeföhrt. Die schrittweisen Anweisungen befinden sich auf der Rückseite.

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
 10 Southgate Road
 Scarborough, Maine 04074 USA
 www.abbott.com/poct



USA
 +1 855 731 2288
 ts.scr@abbott.com
Asien-Pazifik
 +61 7 3363 7711
 APproductsupport@abbott.com
Kanada
 +1 800 818 8335
 CANproductsupport@abbott.com
Europa und Naher Osten
 +44 161 483 9032
 EMEproductsupport@abbott.com
Lateinamerika
 +57 (1) 4824033
 LAmproductsupport@abbott.com

Technischer Kundendienst Hotline
 Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst über:

Nasopharyngeal-Abstrich
 Zur Entnahme eines Nasopharyngeal-Abstrichs den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch mit dem erkennbar stärkeren Sekretionsfluss oder in das stärker verstopfte Nasenloch (bei Abwesenheit von Sekretion) einföhren. Den Tupfer direkt nach hinten föhren, ohne dabei mit der Tupferspitze oben oder unten anzutippen. Der Nasengang verläuft parallel zum Boden, nicht parallel zum Nasenrücken. Den Tupfer unter vorsichtigem Drehen in die anteriore Naris parallel zum Gaumen einföhren und dabei in den Nasopharynx vorschieben, ein paar Sekunden verweilen lassen und dann den Tupfer langsam drehen und dabei herausziehen.
 Um die sachgemäße Probenentnahme zu gewährleisten, den Tupfer eine Strecke vorschieben, die der Hälfte des Abstands von der Nase zur Spitze des Ohrs entspricht. Das entspricht ungeföhrt der halben Länge des Tupfers. Beim Einföhren des Tupfers **KEINE KRAFT ANWENDEN**. Den Tupfer gleichmäßig mit minimaler Reibung bewegen; wenn auf Widerstand gestoßen wird, den Tupfer etwas zurückziehen, ohne ihn aus dem Nasenloch zu nehmen. Dann die Rückseite des Tupfers anheben und nach vorne in den Nasopharynx bringen.


PROBENTNAHME und -HANDABUNG
 Zur Erzielung optimaler Testergebnisse frische Proben verwenden. Eine unsachgemäße Probenentnahme, -handhabung, -lagerung oder ein unsachgemäßer Probentransport kann zu fehlerhaften Ergebnissen föhren.
Nasenabstrich
 Zur Entnahme eines Nasenabstrichs den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch mit dem erkennbar stärkeren Sekretionsfluss oder in das stärker verstopfte Nasenloch (bei Abwesenheit von Sekretion) einföhren. Unter vorsichtigem Drehen den Tupfer vorschieben, bis auf Höhe der Nasenmuschel Widerstand spürbar ist (weniger als 2,5 cm im Nasenloch). Den Tupfer mehrfach gegen die Nasenwand drehen und dann langsam aus dem Nasenloch ziehen.

4 Test bestätigen
 Mit „OK“ den Testtyp bestätigen, der zu der zu testenden QK-Probepass, und die Bildschirmaufforderungen zur Durchföhren des Testvorgangs befolgen.

3 Durchzuföhrenden QK-Test wählen.

2 Wählen Sie im Menü „Influenza A & B“ aus.

1 „QK-Test starten“ drücken.

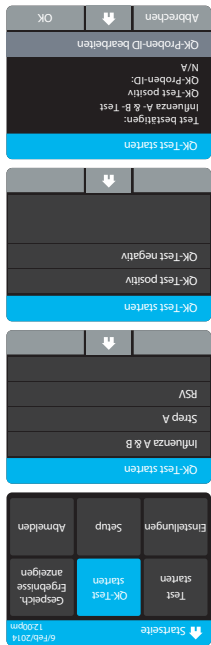

Ein externer positiver und ein steriler Tupfer für die Negativkontrolle müssen einmal bei jeder neuen Lieferung und einmal für jeden ungeschulten Anwender getestet werden.
 Weitere Informationen hierzu sind unter „Durchföhren eines QK-Tests“ im Benutzerhandbuch des Geräts ID NOW Instrument zu finden.

Abbott ID NOW INFLUENZA A & B 2 KURZANLEITUNG

Erforderliche Materialien zum Starten eines Tests:



Gerät:



KOMPLEXITÄT NACH CLIA: BEFREIT


Die vollständigen Anweisungen sind in der ID NOW Influenza A & B 2 Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch zu finden.

ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 KURZANLEITUNG


Die vollständigen Testverfahren und zusätzliche Informationen sind in der ID NOW Influenza A & B 2 Gebrauchsinformation und im Benutzerhandbuch zu finden.

Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.


- 1**



- 2**

15°C – 30°C

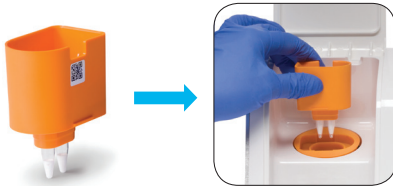
- 3**


15°C – 30°C

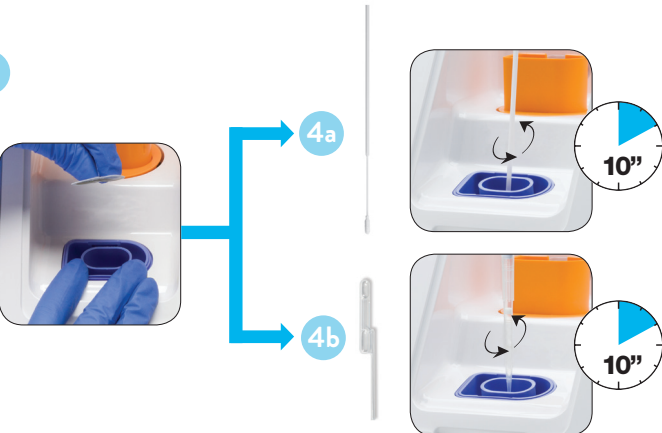

- 4**




4a 10"

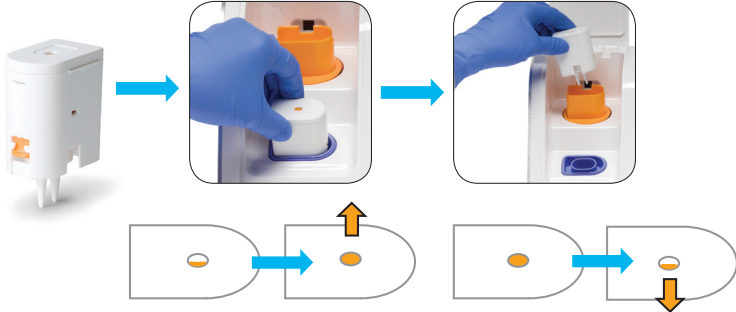4b 10"
- 5**


- 6**




≤ 10'
- 7**

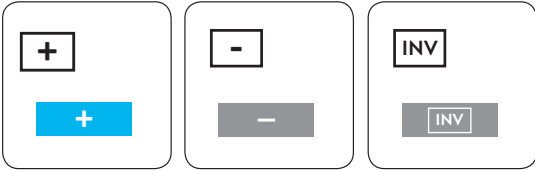



Testergebnisse	
Benutzer-ID: Abbotuser1	17.06.2014 11:22 Uhr
Inf A: Negativ	-
Inf B: Positiv	+
Neuer Test	

Das Verfahren für erneutes Testen bei sowohl Grippe-A- als auch Grippe-B-positiven oder ungültigen Testergebnissen ist in den Anweisungen der Gebrauchsinformation beschrieben.
- 8**



Die Anweisungen zum sicheren Umgang und zur Entsorgung der Proben und Testkomponenten sind in der Gebrauchsinformation zu finden.

<p>Abbott ID NOW Influenza A & B 2</p> <p>QRI, DE</p> <p>Size: 8.5 in. x 11 in.</p>	<p>Printed Colors</p>  <p>CMYK</p> <hr/> <p>Incoming Inspection Colors (For Reference Only) Colors below are not used for printing</p>  <p>PMS 2995 U Primary Blue</p> <p>PMS 303 U Dark Blue</p> <p>PMS 297 U Light Blue</p>	<p>PN: IN427001de Rev: 6</p> <p>Date of Last Revision: 6.1 2020/05/11</p>
--	---	--