


DIAGNOSTIC TOOLS



2023

# PRODUKTKATALOG

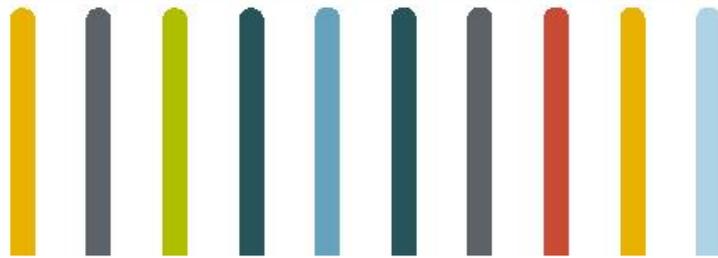

strässle&co

---

Strässle EKG-Vakuumanlagen fungieren als moderner Mittler zwischen Patienten und EKG-Gerät. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf von EKG-Aufnahmen und sind in der modernen Arztpraxis sowie im schnelllebigen Klinikalltag nicht mehr zu entbehren.

DT100 B, DT100 T sowie die DT80 B, DT80 T und die EASY II erfüllen mit Ihren unterschiedlichen Leistungsprofilen die gesamte Palette der Anforderungen moderner EKG-Vakuumanlagen. DT100 B und DT100 T sind auch als Akkuversionen erhältlich.

Das Leistungsspektrum aller Anlagen umfasst Ausblasfunktion, 4-stufige Druckstufenwahl, einstellbar mit dem jeweiligen Einhand-Bedienmodul, LED-Information und selbstverständlich dem Defibrillationsschutz.

Die spezielle Regelautomatik überwacht und steuert Vakuumpumpen in modifizierter Drehschiebertchnik und sorgt für geregelten Halt auch auf schwierigen Hautverhältnissen, wie Lederhaut, sehr knöchernen oder behaarten Patienten.

Die Elektrodenleitungen verfügen über weiche und damit sehr anpassungsfähige Silikon- und Silikon- oder Silber-Silberchlorid-Elektroden, die im Inneren mit einer klassischen Silber-Silberchlorid-Elektrode ausgestattet sind.

Eine hochwertig durchgehende Schirmung, Oxidationsschutz und ein kontrollierter Fertigungsprozess ermöglichen präzise Übertragungen sensibler Messpotentiale und eine sichere Diagnose. Strässle EKG-Vakuumanlagen sind hochwertige medizinische Diagnosewerkzeuge und in der modernen Praxis sowie im Klinikablauf integrierter Bestandteil medizinischer und ökonomischer Investition.

Informativ: Jeder Händler oder Endverbraucher, der Produkte der Strässle & Co. Medizintechnik GmbH mit anderen Produkten zu einem System kombiniert oder zusammenbaut, unterliegt den Anforderungen des (EU) MDR 2017/745 Artikel 22!

**Strässle & Co.  
Medizintechnik GmbH  
Primelweg 5  
D-72461 Albstadt**

Tel.: +49 (0)7432 22 01 86

Fax: +49 (0)7432 22 01 89

info@straessle-co.de

www.straessle-co.de

# DT Basic und DT Basic T



## Anwendung mit Klebeelektroden

### DT Basic

Speziell für die Anwendung mit Klebeelektroden. Die kompakte Version für den praktikablen Einsatz speziell bei beengten Raumsituationen.

Das arretierende Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150 Grad, der gedämpfte horizontale Schwenkradius beträgt 360 Grad.

Inkl. Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm

*[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]*

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-091	DT Basic	1x Tragarm Basic; 1x Patientenkabel mit Verteiler Basic; 1x Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4; <b>1x Tischhalterung</b>



*[Abbildung mit Sonderausstattung, Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten]*

### DT Basic T

Die Ausziehbare. Speziell für die optimierte Anwendung mit Klebeelektroden. Raumgreifend oder kompakt bietet der teleskopierbare Tragarm eine schnelle Anwendung.

Die Funktionalität und das Design spiegeln die aktuellen Anforderungen an einen intelligenten Tragarm. Er lässt sich stufenlos von 84 cm auf 132 cm ausziehen.

Das arretierende Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150 Grad, der gedämpfte horizontale Schwenkradius beträgt 360 Grad.

Inkl. Tischhalterung mit Fixierbereich von 20-55mm

Best.-Nr.	Typ	Lieferumfang/Beschreibung
4000-090	DT Basic T	1x Tragarm Basic T; 1x Patientenkabel mit Verteiler Basic T; 1x Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4; <b>1x Tischhalterung</b>