

MDI

Das ideale HF-Gerät für kleinere **monopolare** Eingriffe.

Das Hochfrequenzchirurgie Gerät mit der Ausgangsleistung von 50 Watt erfüllt alle Ansprüche für kleinere monopolare Eingriffe. Das MDI verfügt über vier verschiedene Stromarten: monopolarer Schneiden sowie monopolarer Koagulieren. Die Auswahl der Stromart erfolgt per Tastendruck. Über den Drehknopf wird die Ausgangsleistung schnell und einfach verändert.


Das MDI ist für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B. chirurgische, dermatologische, dentale, HNO- und veterinärmedizinische Anwendungen geeignet.

The ideal unit for small **monopolar** applications.


The electrosurgical unit with output power of 50 Watt meets all requirements for small monopolar applications. The MDI has four different types of current: two each for monopolar cutting and two each for monopolar coagulation. The type of current is set by pushbutton. The output power is regulated fast and easily by a turning knob.

The MDI is suitable for various application areas, e.g. for surgical, dermatological, dental, ENT and veterinary procedures.

50 Watt

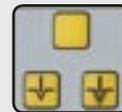

Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten
Monopolar cutting with 2 operation modes

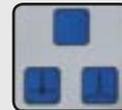

Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten
Monopolar coagulation with 2 operation modes



Mikro-Funktion reduziert die Ausgangsleistung
Micro switch for low-power applications

150-001-001

Monopolar Schneiden 1	Monopolar cut 1	50 Watt, 500 Ω
Monopolar Schneiden 2	Monopolar cut 2	50 Watt, 1000 Ω
Monopolare Koagulation 1	Monopolar coagulation 1	50 Watt, 500 Ω
Monopolare Koagulation 2	Monopolar coagulation 2	35 Watt, 1000 Ω
Typ	Type	BF
Abmessungen	Dimensions	270x127x260 mm
Gewicht	Weight	5,5kg
Gewährleistung (Monate)	Warranty (months)	24
Netzanschluss	Mains supply	115/230 Volt

Mikro Schneiden 1	Micro cut 1	20 Watt, 500 Ω
Mikro Schneiden 2	Micro cut 2	20 Watt, 1000 Ω
Mikro Koagulation 1	Micro coagulation 1	10 Watt, 500 Ω
Mikro Koagulation 2	Micro coagulation 2	10 Watt, 1000 Ω

Beispiele aus dem Anwendungsspektrum:

Epilation, Akne, Pusteln, Furunkel, Besenreiser, Couperose, Entfernung von Warzen, Lupus Vulgaris, Naevi, Keloid, Clavi, Tattoo Entfernung, Altersflecken, Faltenbehandlung, Nasenpolypen, Epistaxis, Pruritis Vulvae, Geschwülste der Harnröhre, Vaginal-Zysten, Cervix-Polypen und Adenome Zysten.

Examples for application areas:

Epilation, acne, pustules, furuncles, spider veins, couperose, removal of warts, lupus vulgaris, naevi, keloid, clavi, tattoo removal, age spots, wrinkle treatment, nasal polyps, epistaxis, pruritis vulvae, ulcerated urethra, vaginal cysts, cervical polyps, adenoma cysts.

Artikelnummer	Bezeichnung	Description
150-001-001	HF-Chirurgie-Gerät MD1	HF surgical unit MD1
151-001-001	Zubehörsatz Dental MD1	Accessory Set Dental MD1
151-001-002	Zubehörsatz Dermatologie MD1	Accessory Set Dermatology MD1
151-001-003	Zubehörsatz Chirurgie MD1	Accessory Set Surgery MD1
151-001-004	Zubehörsatz Kosmetik MD1 Weitere Sets auf Anfrage	Accessory set cosmetic MD1 Further set options available upon request